



Paillasses de Travail

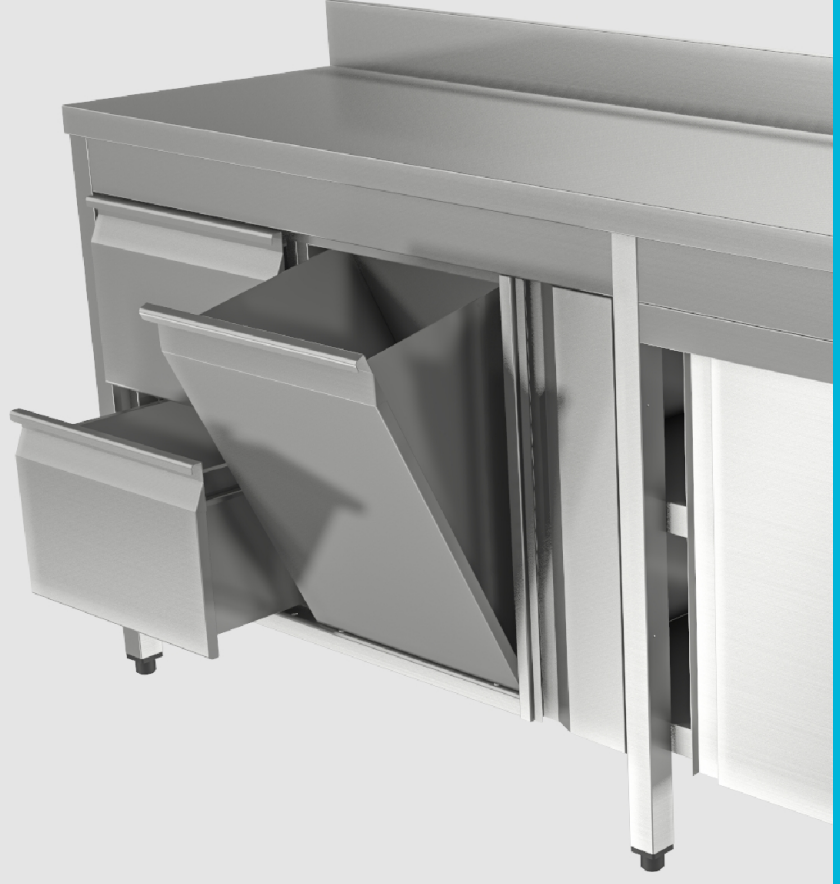

Paillasses de Travail

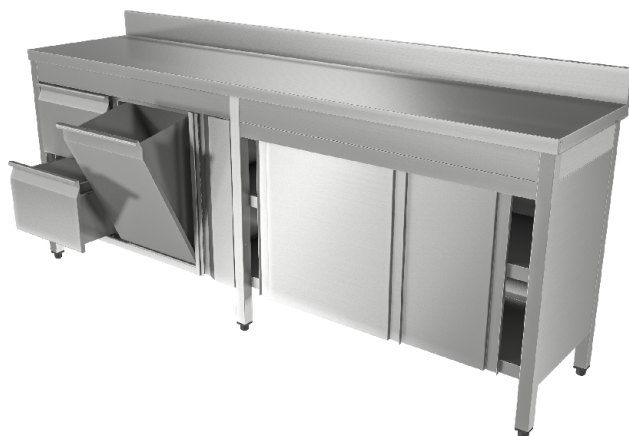

Les paillasses de travail sont spécialement développées pour différentes applications dans une salle de stérilisation ou autre partie de l'hôpital.

Les paillasses sont facilement adaptables aux besoins et peuvent être fabriquées avec: système de tiroirs et bacs, étagères, portes pivotantes ou coulissantes.

Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en acier inoxydable AISI 304L.
- Tables insonorisés.
- Finition polie et arrondie pour faciliter le nettoyage et la promotion des produits d'hygiène.
- Tous les modules peuvent être configurés.
- Construire une gamme robuste et solide de tables est toujours facile à assembler et à transporter.

Il peut être produit avec autres dimensions, veuillez nous consulter.

Options

- Structures fixes ou démontables.
- Tables arrondies.
- Système de tiroirs et bacs.
- Fermeture frontale ou d'arrière.
- Étagères.
- Portes pivotantes ou coulissantes.

Modules

- Modules et tiroirs fabriqués en acier inox AISI 304 L pour utilisation hospitalier, laboratoire ou en ambiances professionnelles exigeantes.
- Les tiroirs ont des guides simples renforcés en acier inox, protection latérale et poignée intégrée, dans un panel frontal de design appélatif.
- Les portes peuvent être équipées avec verrouillage collectif.
- Tous les modèles sont de construction modulaire et sont assemblés sur un châssis en acier inox, fermé latéralement, empêchant l'accès à l'intérieur et offrant une présentation distincte.

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

